



www.wunder.it

InBody230

BODY COMPOSITION ANALYZER

Portata Max 200kg;

Divisione 100g e 0,1%.

Dual frequency 20~100kHz con 8 elettrodi.

Tempo della misurazione in pochi secondi.




RISULTATI TOTALI (BAMBINI)

- **Peso (kg),**
- **PBF:** Massa Grassa (%-kg)
- **SLM:** Massa Magra (kg)
- **SMM:** Massa Muscolo scheletrica(kg)
- **TBW:** Liquidi Tessuti totali
- **BMI:** Body Mass Index
- **BMR:** Metabolismo basale(Kcal)
- **OD:** grado di obesità
- Minerali e proteine
- Grafico della crescita (femmina/Maschio)

RISULTATI SEGMENTALI

- Valori impedenza dei segmenti

FOGLIO DEI RISULTATI:

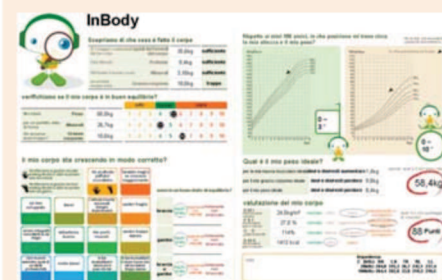


RISULTATI TOTALI (ADULTI)

- **Peso (kg),**
- **PBF:** Massa Grassa (%-kg)
- **SLM:** Massa Magra (kg)
- **SMM:** Massa Muscolo scheletrica(kg)
- **TBW:** Liquidi Tessuti totali
- **BMI:** Body Mass Index
- **BMR:** Metabolismo basale(Kcal)
- **WHR:** rapporto cintura Vita-Fianchi

RISULTATI SEGMENTALI

- Massa Grassa 4 arti e tronco (%-kg)
- Massa Magra divisa in 4 arti e tronco (kg)
- Valori impedenza dei segmenti

FOGLIO DEI RISULTATI:

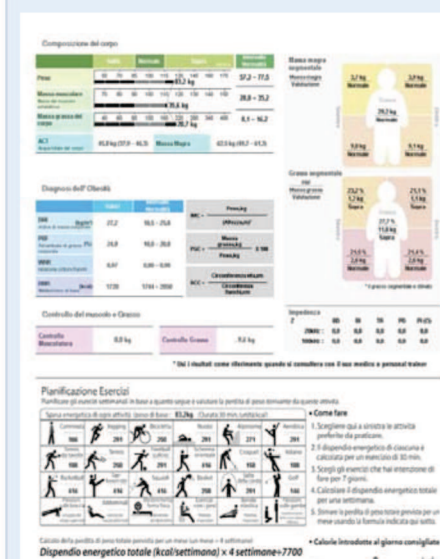

MDD CLASSE IIa

VALIDATO METODICA DEXA: COEFFICIENTE CORRELAZIONE $r=0,98$

ACCESSORI NON INCLUSI/ ACCESSORIES NOT INCLUDED



Software Lookin'Body Basic
cod.00054C



Stampante termica /
Thermal printer cod. 00054S



Statimetro Telescopico
Telescopic Height Meter

PORTATILE LEGGERA SOLO 12kg



Borsa imbottita per trasporto
Carry case cod.00054B

Modello Model	Codice Code	Portata Max Capacity	Divisione (e) Division (e)	Frequenza(Z) Frequency	CND	N° Repertorio
InBody 230	00054	250kg	100g	Dual frequenze 20KHz~100KHz	V030299	522710



CE
0120



Direttiva metrica 90/384/CEE
Ecc directive 90/384/CEE

Classe di precisione III, per uso medico
Approved medical class III, for medical use



Dispositivi medici 93/42/CEE
Ecc directive 93/42/CEE

Classe di rischio I, con funzione di misura
Risk class I, with measurement function

Struttura
Structure

Alluminio e metallo verniciato; Grande pedana,
Aluminium and metal tubular painted; Large platform,

Metodo di misurazione
Measure method

Multifrequenza Segmentale Diretta **DSM** a 8 punti contatto 2 frequenze, senza stime empiriche in meno di 30 secondi
DSM Direct Segmental Multi-frequency method, with 8 point tetrapolar tactile, time of measurement in less than 30 second, without use of Empirical Estimation

Visore
Display

Grande LCD TFT a colori multiriga
Multiline Large LCD TFT colours

Alimentazione
Power

Alimentatore esterno
External adapter } AC 100-220V, 50/60Hz

Sicurezza elettrica
Electrical safety

Classe II- Tipo B
Class II- Tipe B

Uscita dati
External Interface

N°01 RS232 per stampante termica; N°01 USB computer; N°01 stampante ufficio
N°01 RS232 thermal printer; N°01 USB computer; N°01 office printer

Dimensioni mm
Size mm

Totale/ Total
(W)356x(L)843x(H)984

Base/ Platform
(W)x(L)x(H)

Peso
Weight

Circa 14kg;
Approx 14kg

Confezione
Packaging

1pcs dimensione (w)465x(L)850x330(h)mm, Peso circa 20kg/
1 pcs dimensions (w)465x(L)850x330(h)mm, Weight approx 20kg

Garanzia/ Warranty


2 anni/2 years

Accessori inclusi
Accessories included

Livella, Piedini regolabili; Elettrodi fissi
Level Bouble, Adjustable Feet;

Accessori non inclusi
Accessories not included

Misura pressione arteriosa BP320; *Blood pressure model BP320;*
Software Lookin'body Basic; *Lookin'Body Basic software;*
Salviette igienizzanti elettrolitiche *Electrolyte tissue*

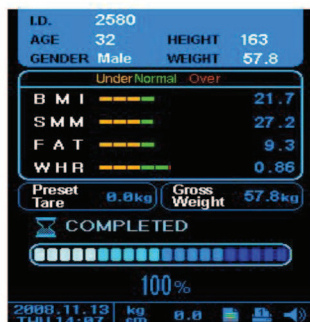

GRANDE visore TFT a colori con grafici
Oversized LCD TFT with graphs



Larghezza rotolo 57mm

Stampante termica / Thermal printer
cod. 00054S

PORTATILE LEGGERA
SOLO 12kg



Borsa in bottita per trasporto
Carry case cod.00054B

Anagrafica pazienti

Storico paziente

Bambino fase di crescita

Misurazione adulto



Lookin'Body
InBody Data Management System

SOFTWARE GESTIONALE INBODY 230

Il programma è sviluppato per sistemi operativi Microsoft, Windows XP, Vista e Seven.
Il programma è dotato di una ricerca veloce per individuare il paziente interessato.
Tutti i risultati archiviati possono essere trasferiti direttamente su foglio di lavoro Excel.
Si possono archiviare fino a 1000 pazienti.
E' possibile mettere a confronto le misurazioni di ogni paziente per individuare il miglioramento /peggioramento del paziente.

Il software si divide in :


Profilo paziente: sono raccolti tutti i dati identificativi di ogni persona.

Analisi paziente: sono archiviate tutte le misurazioni di ogni persona: basta digitare cerca per visualizzare tutte o la singola misurazione per delineare un'analisi approfondita delle composizioni corporea.

Storico paziente: visualizza in veste grafica tutte le misurazioni per individuare il miglioramento /peggioramento del paziente.

Report Body Composition- Bambino

www.wunder.it

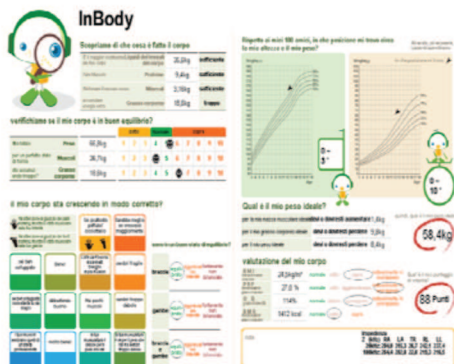

Report Body Composition- Adulto

www.wunder.it



Report Storico Paziente

www.wunder.it

